



ReSound GN

ReSound Micro Mic

# Brugsanvisning

**GN** Making Life Sound Better

## Velkommen

Tillykke med købet af en ReSound Micro Mic. Denne Micro Mic er en bærbar tale- og lydstreamer i høj kvalitet, der streamer tale og lyd direkte til dine høreapparater.

Læs denne manual grundigt for at få det fulde udbytte af din Micro Mic. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du har nogle spørgsmål.

Du kan få flere oplysninger ved at besøge [www.resound.com](http://www.resound.com)

Af hensyn til din sikkerhed bør du omhyggeligt læse afsnittet Vigtige oplysninger, der starter på side 29.

FCC ID: X26SM-2M

## Erklæring:

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne og ISED-regler. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Udstyret er testet og efterkommer begrænsningerne for digitalt udstyr i klasse B i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne og ISED-regler. Disse begrænsninger er lavet for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse i beboelsesinstallationer. Dette apparat skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og det kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Imidlertid er der ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en særskilt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, kan du prøve at afhjælpe problemet på en eller flere af følgende måder:

- Genindstil eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem produktet og modtageren.
- Forbind udstyret til en anden stikkontakt eller en anden strømkreds end den, som modtageren er forbundet til.

Kontakt din forhandler eller en autoriseret radio/tv-tekniker.

Ændringer eller modifikationer kan annullere brugerens bemyndigelse til at betjene dette udstyr.

### **Anvendelsesformål**

Giver høreapparatbrugere mulighed for at følge tale eller lytte til andre lydssignaler.

Produktet overholder følgende standarder:

I EU: Udstyret opfylder de væsentlige krav i henhold til bilag I til Rådets direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr (MDD).

GN Hearing A/S erklærer hermed, at radioudstyretypen SM-2M er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fulde tekst for EU's overensstemmelseserklæring fås på følgende internetadresse: [www.declarations.resound.com](http://www.declarations.resound.com)

I USA: FCC CFR 47 Part 15, subpart C.

I Canada: IC 6941C-SM2M

Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:

1. Dette produkt kan ikke fremkalde interferens, og
2. Dette produkt skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan fremkalde uønskede fejl.

Du kan få oplysninger om andre gældende internationale krav i lande uden for EU og USA i de lokale krav for disse områder.

I JP: I overensstemmelse med Japanese Radio Law og Japanese Telecommunications Business Law.

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law (電波法) and the Japanese Telecommunications Business Law (電気通信事業法). This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).

## Indhold

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Velkommen . . . . .                                | 2  |
| Erklæring . . . . .                                | 3  |
| Anvendelsesformål . . . . .                        | 4  |
| Beskrivelse . . . . .                              | 8  |
| Sådan kommer du i gang . . . . .                   | 10 |
| Sådan tænder og slukker du din Micro Mic . . . . . | 12 |
| Parring med dine høreapparater . . . . .           | 12 |
| Start streaming . . . . .                          | 15 |
| Stop streaming . . . . .                           | 16 |
| Sådan bærer du din Micro Mic . . . . .             | 18 |
| Kontrollampe (lysdiode). . . . .                   | 20 |
| Lydstyrkeregulering og slå lyden fra . . . . .     | 22 |
| Kontrollampe for mute . . . . .                    | 24 |
| Specielle funktioner . . . . .                     | 24 |
| Testfunktion . . . . .                             | 26 |
| Vigtige oplysninger . . . . .                      | 28 |
| Generelle advarsler . . . . .                      | 29 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Generelle forholdsregler . . . . .                            | 30 |
| Vedligeholdelse af indbygget batteri . . . . .                | 32 |
| Batteriadvvarsler . . . . .                                   | 33 |
| Vedligeholdelse af oplader . . . . .                          | 34 |
| Opladeradvvarsler . . . . .                                   | 34 |
| Tekniske specifikationer . . . . .                            | 36 |
| Temperaturtest, transport og opbevaringsoplysninger . . . . . | 36 |
| Garanti . . . . .                                             | 36 |
| Hvad dækker garantien? . . . . .                              | 37 |
| Hvad dækker garantien ikke? . . . . .                         | 37 |
| Fejlfindingsvejledning . . . . .                              | 38 |

## Beskrivelse

- 1 Tænd/sluk-knap
- 2 Mikrofonindgang
- 3 Mikrofonindgang
- 4 Kontrollampe (lysdiode)
- 5 Micro USB til opladning



- 6 Lydstyrke ned
- 7 Mute-knap
- 8 Lydstyrke op
- 9 Kontrollampe for mute (lysdiode)
- 10 Parringsknap
- 11 Påsætningsclip




## Sådan kommer du i gang

Inden du bruger din Micro Mic, skal du sørge for at lade det genopladelige batteri helt op. Du lader det op ved at sætte opladerkablet i Micro Mic'en som vist på billedet nedenfor.

Derefter sætter du den anden ende af opladerkablet i opladeren, som tilsluttes en stikkontakt.

Under opladningen lyser kontrollampen rødt. Når batteriet er fuldt opladet, men stadig forbundet med opladeren, lyser kontrollampen rødt afbrudt af et grønt blink hvert 2. sekund.

Opladning af et fladt batteri tager ca. 3 timer. Du kan også vælge at oplade batteriet om natten. Det kan ikke overoplades.

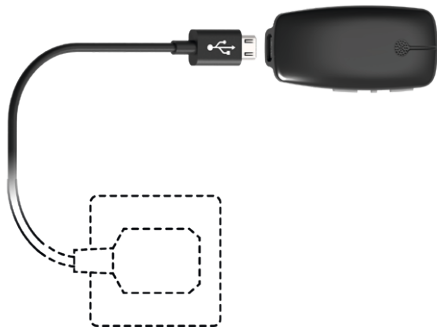

- Når du oplader din Micro Mic første gang, skal du oplade den i mindst 3 timer, også selvom kontrollampen lyser grønt tidligere.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at du oplader batteriet med opladeren fra ReSound.



*Bemærk: Beskyt Micro Mic'en ved at benytte den bæretaske, der fulgte med mikrofonen, når du ikke bruger den.*



Du må ikke oplade Micro Mic'en, mens den sidder på kroppen.

## Sådan tænder og slukker du din Micro Mic

Du tænder Micro Mic'en ved at trykke på tænd/sluk-knappen (se side 8) i ca. 1,5 sekund, indtil kontrollampen lyser grønt. Når du slipper tænd/sluk-knappen, lyser kontrollampen grønt hvert 2. sekund.

Du slukker Micro Mic'en ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i ca. 1,5 sekund, indtil kontrollampen lyser rødt, hvilket angiver, at enheden lukker ned.

Når batterispændingen er lav, blinker kontrollampen orange hvert 2. sekund.

## Parring med høreapparaterne

*Bemærk: Følgende oplysninger er primært henvendt til din høreapparatspecialist, som i de fleste tilfælde vil foretage de justeringer, der er nødvendige, før Micro Mic'en kan bruges sammen med dit høreapparat. Men du kan også sagtens foretage parringen hjemme. Det er meget enkelt.*

*Det er muligt at parre op til tre ReSound streamingenheder med dine høreapparater, f.eks. en Micro Mic og to tv-streamere (Unité™ ekstraudstyr efter eget valg). Du skal derfor vælge kanal 1, 2, eller 3, når du starter parringsprocessen.*

## Parring af Micro Mic'en i kanal 1

1. Sørg for, at Micro Mic'en er tændt. Dine høreapparater skal være slukkede – åbn batteridørene.
2. Med spidsen af en kuglepenn eller lignende skal du trykke på den lille parringsknap én gang, som vist på billedet til højre. Kontrollampen blinker nu orange hvert 2. sekund for at angive, at Micro Mic'en er klar til at blive parret i kanal 1. Micro Mic'en forbliver i parringsfunktionen i 20 sekunder.
3. Mens parringsfunktionen er aktiv, skal du lukke batteridøren på begge høreapparater og sørge for, at de er tændt. Når parringen er fuldført, hører du en melodi i begge høreapparater, og kontrollampen (se side 8) lyser orange i 3 sekunder. Du kan nu bruge Micro Mic'en!



*Parring af Micro Mic'en i kanal 2 eller 3 (for brugere, der benytter mere end én streamingenhed)*

Du parrer din Micro Mic i kanal 2 ved at trykke på parringsknappen to gange. Kontrollampen blinker nu gult to gange hvert 2. sekund, hvilket indikerer, at den er klar til at blive parret i kanal 2. Luk batteridørene på høreapparaterne.

Du parrer din Micro Mic i kanal 3 ved at trykke på parringsknappen tre gange. Kontrollampen blinker gult 3 gange hver 2. sekund for at angive, at den er klar til at blive parret i kanal 3. Luk batteridørene på høreapparaterne.

Blinkende mønster under parring:

| Tryk på parringsknapp   | Mønster for kontrollampe                                                          | Kanal |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                       |  | 1     |
| 2                       |  | 2     |
| 3                       |  | 3     |
| Parringen blev fuldført |  |       |

## Start streaming

Tænd din Micro Mic og dine høreapparater. Du kan starte streamingen på tre forskellige måder:

1. Tryk på og hold programvælgeren eller til/fra-knappen på begge høreapparater nede i tre sekunder for at lytte til et streamet lydsignal\*. Hvis øre til øre-koordination er aktiveret på dine høreapparater, skal du kun aktivere streaming på det ene af dine høreapparater.
2. Hvis du har en ReSound Unite™ fjernbetjening (ekstraudstyr), skal du blot trykke på knappen  på fjernbetjeningen\*.
3. Hvis du bruger en ReSound app med fjernbetjeningsfunktionalitet, skal du blot vælge Micro Mic programmet på programskærmen\*.

\*Når høreapparaterne opretter forbindelse til din Micro Mic, afspilles en kort melodi for "streamingaktivering" efterfulgt af den streamede lyd.

### *Start streaming med en 2. og 3. streamingenhed*

Hvis dine høreapparater er parret med mere end én streamingenhed, kan du starte streaming på tre måder.

1. Tryk på og hold programvælgeren på høreapparatet nede i ca. 3 sekunder to eller tre gange i træk for at aktivere den anden eller tredje ReSound streamingenhed.
2. Hvis du bruger en Unite™ fjernbetjening (ekstraudstyr), skal du trykke på streamingknappen på Unite™ fjernbetjeningen to eller tre gange for at få adgang til den 2. eller 3. ReSound streamingenhed.
3. Hvis du bruger en ReSound app med fjernbetjeningsfunktion, skal du blot vælge det ønskede streamingprogram på programskærmen\*.

## Stop streaming

*Du kan stoppe streamingen på tre forskellige måder:*

1. Tryk på programknappen på høreapparaterne én gang\*.
2. Hvis du har en ReSound Unite™ fjernbetjening (ekstraudstyr), skal du trykke på knappen "P" midt på tastaturet\*. Du kan også trykke på knappen Home for at vende tilbage til standardindstillingerne.
3. Hvis du bruger en ReSound app, skal du vælge det ønskede program på programskærmen.


\*Herefter vender høreapparatet tilbage til det program, der sidst blev benyttet.



*Bemærk: Du kan komme uden for rækkevidde af din Micro Mic. Hvis din Micro Mic kommer uden for rækkevidde og inden for rækkevidde igen inden 5 minutter, opretter høreapparaterne automatisk forbindelse igen og fortsætter streamingen. Dette gælder også, hvis din Micro Mic slukkes og tændes igen inden 5 minutter.*

## Sådan bærer du din Micro Mic

Sæt Micro Mic'en på en jakke eller skjorte, eller hæng den i en snor rundt om halsen på den person, som du gerne vil lytte til. Husk, at den skal være 10-40 cm fra personens mund. Når du bruger clipsen, skal du sikre, at Micro Mic'en monteres lodret, og at kontrollampen peger mod munden.

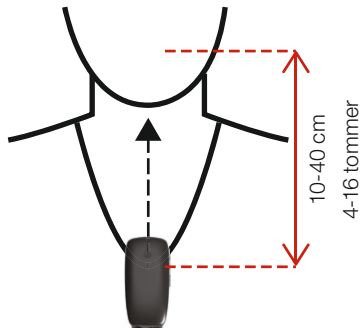

## Kontrollampe (lysdiode)

Kontrollampen på din Micro Mic fungerer som en brugergrænseflade med flere funktioner, der forsyner dig med forskellige oplysninger om enheden.

| Tændt/oplader                                                        | Ingen opladning                                                                                | Oplader                                                                                         | Fuldt opladet                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slukket                                                              |                                                                                                |               |               |
| Tændt (normal)                                                       |               |               |               |
| Tændt<br>(Lydstyrkereguleringen er deaktiveret)                      |               |               |               |
| Tændt (lavt batteriniveau)                                           |               | Ingen kontrollampeindikation                                                                    | Ingen kontrollampeindikation                                                                     |
| Tændt (lavt batteriniveau)<br>(Lydstyrkereguleringen er deaktiveret) |               | Ingen kontrollampeindikation                                                                    | Ingen kontrollampeindikation                                                                     |
| Lydstyrkereguleringen<br>er låst eller låst op (se side 24)          |               |               |               |
| Angivelse af, at apparatet tændes                                    |  3 sekunder   |  3 sekunder   |  3 sekunder   |
| Angivelse af, at apparatet slukkes                                   |  3 sekunder   |  3 sekunder   |  3 sekunder   |
| Testfunktion (se side 26)                                            |  Konstant lys |  Konstant lys |  Konstant lys |


## Lydstyrkeregulering og slå lyden fra

### Lydstyrkeregulering

Micro Mic'en er designet til at levere en behagelig lydstyrke fra det øjeblik, den aktiveres. Det kan dog være nødvendigt at justere lydstyrken for nogle enheder eller i nogle lyttesituationer. Du kan skrue op eller ned på flere måder. Husk, at justering af lydstyrken kun gælder for det streamede signal.

- Brug knapperne "+" og "-" (se side 9) for at justere lydstyrken til et passende niveau.

Hver ændring af lydstyrken på Micro Mic'en angives af, at kontrollampen for mute blinker kort. Når maksimum- eller minimum-niveauet for lydstyrken nås, lyser kontrollampen for mute orange i længere tid (1 sekund).

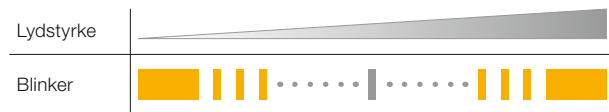

*Bemærk: Micro Mic'en vender tilbage til standardniveauet for alle funktioner, når den genstartes.*

Brug Resound Unite™ fjernbetjeningen (ekstraudstyr) til at justere streaminglydstyrken i høreapparaterne. Kontakt din høreapparatsspecialist, hvis du har brug for flere oplysninger.

### Mute

Signalet fra Micro Mic'en kan slås fra, hvis brugeren af enheden vil deltage i samtaler eller aktiviteter, der er høreapparatbrugerens uvedkommende.

- Du slår lyden fra ved at trykke på mute-knappen (se side 9) én gang. Kontrollampen for mute begynder nu at blinke orange.
- Du slår lyden til igen ved at trykke på mute-knappen én gang. Kontrollampen for mute stopper nu med at blinke orange.

*Bemærk: Når du genstarter Micro Mic'en, mens lyden er slået fra, slås lyden til igen.*

## Kontrollampe for mute

| Konfiguration/blinkende mønster       | Kontrollampe for mute                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Normal betjening (lyden er slået til) |                                                                                   |
| Normal betjening (lyden er slået fra) |  |

## Specielle funktioner

### Registrering af tab

Hvis Micro Mic'en bliver tabt fra en højde, der er mere end 75 cm, slår den indbyggede sensor den lyd, der streames til høreapparaterne, fra i op til 2 sekunder. Dette sker for at beskytte høreapparaturbrugeren mod meget høj og ubehagelig lyd som følge af tabet, hvis enheden ved et uheld tapes under brug.

### Lås af lydstyrkeregulering

Lydstyrken for Micro Mic'en kan efter behov låses på et bestemt niveau.

Når lydstyrkereguleringen er låst, sker det ved den lydstyrke Micro Mic'en havde, da den blev slukket, men det er stadigvæk muligt at slå lyden til og fra på enheden.

### Sådan låser du lydstyrkereguleringen

- Sørg for, at Micro Mic'en er slukket.
- Tryk på og hold lydstyrkeknappen '-' og tænd/sluk-knappen nede i 1,5 sekund, indtil kontrollampen lyser grønt (Micro Mic tændes), og slip derefter tænd/sluk-knappen.
- Bliv ved med at trykke på lydstyrkeknappen '-', indtil en grøn-orange-rød kontrollampesekvens vises på kontrollampen efter 10 sekunder.

Kontrollampen blinker nu to gange hvert 2. sekund for at angive, at lydstyrkereguleringen er låst.

### Sådan låser du lydstyrkereguleringen op

- Sørg for, at Micro Mic'en er slukket.
- Tryk på og hold lydstyrkeknappen '+' og tænd/sluk-knappen nede i 1,5 sekund, indtil kontrollampen lyser grønt (Micro Mic tændes), og slip derefter tænd/sluk-knappen.
- Bliv ved med at trykke på lydstyrkeknappen '+', indtil en grøn-orange-rød kontrollampesekvens vises på kontrollampen efter 10 sekunder.

## Testfunktion

Testfunktionen bruges primært til pædiatriske transparensmålinger. Transparensmålingen evaluerer, om høreapparatet og de trådløse (eksterne) mikrofoner leverer det samme output, når de udsættes for det samme 65 dB SPL-input.

I testfunktionen indstilles mikrofonen til retningsuafhængig funktion med en forstærkning på 0 dB, når den placeres vandret i testkammeret. Se de relevante retningslinjer for udførelse af transparensmålinger.

*Sådan skifter du til testfunktionen:*

- Sørg for, at Micro Mic'en er slukket.
- Tryk på og hold mute-knappen og tænd/sluk-knappen nede i 1,5 sekund, indtil kontrollampen lyser grønt, og slip derefter tænd/sluk-knappen.
- Bliv ved med at trykke på mute-knappen, indtil en grøn-orange-rød kontrollampesekvens vises på kontrollampen efter 10 sekunder.
- I testfunktionen lyser kontrollampen (se side 8) konstant orange.
- Når testfunktionen åbnes, anvendes standardlydstyrken. Lydstyrken kan om nødvendigt justeres på Micro Mic'en, indtil transparensen er blevet bekræftet.

- Du afslutter testfunktionen og gemmer indstillingerne ved at slukke Micro Mic'en og låse lydstyrkereguleringen (se afsnittet om lydstyrkeregulering i kapitlet Specielle funktioner).



*Bemærk: Justeringer i forbindelse med transparens foretages på Micro Mic'en og/eller i høreapparatet vha. tilpasningssoftwaren.*

## Vigtige oplysninger

### *Vedligeholdelse og rengøring*

- Rengør Micro Mic'en med en tør klud. Brug aldrig rengøringsmiddel (opvaskemiddel, sæbe m.v.) eller opløsningsmiddel til at rengøre enheden.
- Når Micro Mic'en ikke er i brug, skal den slukkes og opbevares sikkert.
- Sørg for at beskytte Micro Mic'en mod fugt (badning, svømning) og varme (radiator, bil, instrumentbræt).
- Sørg for at beskytte den mod stød og rystelser.
- Beskyt mikrofonåbningen og stikket til opladning mod snavs og skidt. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge den rensebørste, der fulgte med høreapparaterne, til at rengøre disse områder.

## Generelle advarsler

- Enheden skal opbevares uden for små børns rækkevidde (børn under 3 år).
- Små børn kan vikle ledninger og snore/nøgleringe om halsen med risiko for kvælning til følge. Opbevar derfor altid disse utilgængeligt for børn.
- Micro Mic'en kan blive forstyrret af andet udstyr.
- Micro Mic'en benytter digitalt kodede transmissioner til at kommunikere med andre trådløse enheder. Elektroniske apparater i umiddelbar nærhed kan blive påvirket, selvom det er usandsynligt. Hvis dette sker, skal du fjerne Micro Mic'en fra det påvirkede elektroniske apparat.
- Når du bruger Micro Mic'en, og mikrofonen påvirkes af elektromagnetisk interferens, skal du flytte den væk fra kilden.
- Undgå at udsætte produktet for regn, fugt eller andre væsker for at beskytte produktet mod skader og dig mod personskade.
- Hold produktet og alle ledninger og kabler væk fra maskiner i drift.
- Hvis produktet bliver overophedet, hvis produktet er blevet tabt eller beskadiget, hvis det har en beskadiget ledning eller stik eller produktet er blevet tabt i en væske, skal du ophøre

med at bruge det og kontakte din høreapparatspecialist.

- Må ikke anvendes i områder, hvor der er eksplosionsfare, eller hvor der er fare for antændelse af brændbare gasser.



### Generelle forholdsregler

- Må ikke benyttes på steder, hvor det er forbudt at anvende elektronisk udstyr.
- Røntgenstråling (f.eks. CT- eller MRI-scannere) kan have en skadelig indvirkning på denne enhed Vi anbefaler, at du slukker apparatet og lader det blive udenfor, når du skal røntgenfotograferes.
- Kraftigt elektronisk udstyr, større elektroniske installationer og metalliske strukturer kan påvirke og reducere dækningen betragteligt.
- Hvis høreapparatet ikke reagerer på enheden pga. interferens, så bevæg dig væk derfra.
- Dine høreapparater og denne enhed fik en unik kode under tilpasningen. Dette sikrer, at apparatet ikke vil påvirke andres høreapparater.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på denne enhed.
- Micro Mic'en kan gå i stykker, hvis du forsøger at åbne den. Hvis der opstår problemer, som ikke kan løses, skal du kontakte din høreapparatspecialist.

- Micro Mic'en må kun repareres af et autoriseret servicecenter.
- Brug ikke Micro Mic'en i områder, hvor RF-transmission ikke er tilladt, f.eks. om bord på fly m.v.
- Tilslut kun Micro Mic'en til forbindelser, som den udtrykkeligt er beregnet til.

## Vedligeholdelse af det indbyggede batteri



Læs nedenstående hvis produktet indeholder et batteri.

- Produktet indeholder et genopladeligt batteri.
- Et nyt batteri opnår først sin fulde kapacitet efter to eller tre fulde op- eller afladninger.
- Batteriet kan op- og aflades mange gange, men vil med tiden blive slidt ned.
- Træk opladerens stik ud af stikkontakten, når den ikke bruges. Efterlad ikke et fuldt opladet batteri i en tændt oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Et fuldt opladet batteri vil miste sin opladning over tid, hvis det ikke bruges.
- Batteriets kapacitet og levetid vil reduceres, hvis det efterlades på varme steder som f.eks. en lukket bil en varm sommerdag.
- Et produkt med et koldt batteri virker måske ikke med det samme – også selvom batteriet er fuldt opladet. Batteriers ydeevne begrænses, når temperaturen kommer under frysepunktet.

## Batteriadvarel



- "Advarsel" – batteriet i dette produkt kan udgøre en brandrisiko eller forårsage et kemisk brandsår, hvis det ikke behandles korrekt.
- Forsøg ikke at åbne batteriet eller udskifte det, da garantien dermed bortfalder. Batteriet er indbygget og kan ikke udskiftes. Brug af andre batterier kan indebære en risiko for brand eller eksplosion, og vil medføre at garantien bortfalder.
- Batteriet i dette produkt kan ikke fjernes eller udskiftes af brugeren. Det er meget risikabelt at prøve og kan ødelægge produktet.
- Brug kun Micro Mic'en sammen med den strømforsyningsenhed, der fulgte med produktet.
- Smid ikke batterier ud sammen med almindeligt affald, da der er risiko for, at de kan eksplodere. Indlever til genbrug, når det er muligt.
- Batteriet må ikke bortskaffes som husholdningsaffald og må ikke kastes i åben ild, da det kan eksplodere.
- Hvis batteriet bliver beskadiget, kan det eksplodere.

## Vedligeholdelse af oplader

Læs nedenstående, hvis produktet er udstyret med en oplader.

- Forsøg ikke at oplade produktet med andet end den AC-adapter, der fulgte med. Brug af andre opladere kan beskadige produktet og være farligt.
- Brug af andre opladere kan gøre garantien ugyldig.
- Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din høreapparatspecialist.
- Oplad produktet iht. den instruktion, der fulgte med.

## Opladeradvarsler

Brug kun enheden sammen med den strømforsyningsenhed, der følger med produktet. Brug af andre opladere kan beskadige produktet og være farligt. Brug af andre strømforsyninger kan gøre garantien ugyldig.

- Når du tager stikket ud af stikkontakten, så tag fat i stikket og ikke i ledningen.
- Brug aldrig en strømforsyning, der er ødelagt.
- Forsøg aldrig at åbne eller skille strømforsyningen ad, da det kan udsætte dig for farlige elektriske stød.
- Ukorrekt samling kan forårsage elektrisk stød eller brand, når produktet bruges efterfølgende.

- Undgå at oplade din Micro Mic i ekstremt høje eller lave temperaturer, og brug ikke opladeren udenfor eller i fugtige omgivelser.



Du må ikke oplade Micro Mic'en, mens den sidder på kroppen.

## Tekniske specifikationer

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Driftsområde:                    | Op til 25 meter (frit udsyn) |
| Strømforsyning:                  | Ekstern vægadapter           |
| Trådløs:                         | 2,4 GHz                      |
| Drifts- og opladningstemperatur: | 0 til 45 °C                  |
| Opbevaringstemperatur:           | -20 til 45 °C                |

## Temperaturtest, transport og opbevaringsoplysninger

Produktet er testet under forskellige temperatur- og fugtighedsforhold på mellem -25 ° C og 70 ° C i henhold til interne og branchespecifikke standarder.

## Garanti

Micro Mic'en er dækket af en begrænset garanti ydet af producenten i 1 år fra købstidspunktet. Læg venligst mærke til, at der kan gælde udvidede garantier i dit land. Kontakt din høreapparatspecialist for flere oplysninger.

## Hvad dækker garantien?

Alle elektriske komponenter, der på grund af materiale-, fabriktions- eller designmæssige fejl ikke fungerer ved normal brug i løbet af garantiperioden, vil blive udskiftet eller repareret uden beregning for dele eller arbejdskraft, når produktet returneres til købsstedet. Hvis det konstateres, at produktet ikke kan repareres, kan hele enheden blive udskiftet med en tilsvarende enhed efter gensidig aftale med høreapparatspecialisten og kunden.

## Hvad dækker garantien ikke?

Fejl eller skade, som opstår på grund af uhensigtsmæssig brug eller vedligeholdelse, forkert brug, uheld, reparationer udført af uautoriseret person, uegnet korroderende miljø eller skade på grund af indtrængen af fremmedlegemer, er IKKE dækket af den begrænsede garanti og kan eventuel gøre den ugyldig. Ovennævnte garanti påvirker ikke dine eventuelle juridiske rettigheder i henhold til gældende national lovgivning vedrørende salg af forbrugsvarer. Din høreapparatspecialist yder muligvis en garanti med mere omfattende dækning end denne begrænsede garanti. Kontakt din høreapparatspecialist for yderligere oplysninger.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

# FEJLFINDINGSVEJLEDNING

| Symptom                                                                                   | Mulig årsag                                                           | Mulig løsning                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Micro Mic'en kan ikke tændes                                                              | Du trykker ikke lang tid nok på tænd/sluk-knappen.                    | Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst 1,5 sekund, indtil kontrollampen lyser grønt i 3 sekunder. |
|                                                                                           | Micro Mic'en er løbet tør for strøm.                                  | Oplad batteriet i Micro Mic'en.                                                               |
| Micro Mic'en kan ikke slukkes                                                             | Du trykker ikke lang tid nok på tænd/sluk-knappen.                    | Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst 1,5 sekund, indtil kontrollampen lyser grønt i 3 sekunder. |
| Lydstyrken kan ikke ændres vha. lydstyrkereguleringen på Micro Mic'en                     | Lydstyrken på Micro Mic'en kan være blevet låst på et bestemt niveau. | Lås lydstyrkereguleringen op (se kapitlet Låsning af ydstyrkeregulering).                     |
| Der er ingen lyd i høreapparaterne, selvom de stadig er indstillet på streamingprogrammet | Micro Mic'en og høreapparaterne er uden for trådløs rækkevidde.       | Kontrollér, at Micro Mic'en og høreapparaterne er inden for trådløs rækkevidde.               |
|                                                                                           | Micro Mic'en er ikke længere tændt.                                   | Tænd Micro Mic'en, og aktivér streaming igen.                                                 |
|                                                                                           | Micro Mic'en er løbet tør for strøm.                                  | Oplad batteriet i Micro Mic'en.                                                               |
|                                                                                           | Lyden i Micro Mic'en er slået fra.                                    | Slå lyden i Micro Mic'en til igen.                                                            |

# FEJLFINDINGSVEJLEDNING

| Symptom                                                                                        | Årsag                                                                                                        | Mulig løsning                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Har trykket på program-vælgeren på høreapparatet i mere end 3 sekunder, uden at der sker noget | Micro Mic'en og høreapparaterne er muligvis ikke blevet parret.                                              | Gennemgå parringsprocessen.                                                                                                                                               |
| Når parringssekvensen er fuldført, afspilles der ingen parringsmelodi i høreapparatet          | Micro Mic'en og høreapparatet er ikke inden for trådløs rækkevidde.                                          | Sørg for at Micro Mic'en og høreapparatet er inden for trådløs rækkevidde, og gentag parringsprocessen.                                                                   |
|                                                                                                | Micro Mic'en og høreapparatet var ikke i parringstilstand samtidig.                                          | Gentag parringsprocessen og sørg for at batteridørene på begge høreapparater bliver lukket inden 20 sekunder efter, at du har trykket på parringsknappen på Micro Mic'en. |
| Et eller begge høreapparater falder ud af streaming-programmet                                 | Batteriet på det ene eller begge høreapparater er så afladet, at det ikke længere understøtter lydstreaming. | Udskift batteriet i høreapparatet med et nyt, og aktivér streaming igen.                                                                                                  |

# FEJLFINDINGSVEJLEDNING

| Symptom                                    | Mulig årsag                                                    | Mulig løsning                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lydniveauet fra Micro Mic'en er meget lavt | Micro Mic'en bæres ikke korrekt af den person, der har den på. | Sæt Micro Mic'en på en jakke eller skjorte, eller hæng den i en snor rundt om halsen på den person, som du gerne vil lytte til. Husk, at den skal være 10-40 cm fra personens mund. |
|                                            | Lyden i mikrofonen er meget lav.                               | Juster lydstyrken ved hjælp af knappen "+" på din Micro Mic.                                                                                                                        |

Vær opmærksom på oplysninger markeret med advarselssymbol



**ADVARSEL** angiver en situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser.

**BEMÆRK** angiver en situation, der kan føre til mindre og moderate skader.



Råd og tips til, hvordan du håndterer ReSound tilbehøret bedre.



Denne enhed omfatter en RF-sender, der fungerer inden for frekvensområdet 2,4 GHz-2,48 GHz.

Den nominelle RF-udgangseffekt er 14,3 dBm.



Spørg din lokale høreapparatspecialist til råds om bortskaffelse af din Micro Mic.



© 2018 GN Hearing A/S. Alle rettigheder forbeholdes.  
ReSound er et varemærke, der tilhører GN Hearing A/S.



Producent i henhold til EU's direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF:

**Internationalt Hovedkontor**

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Danmark  
Tlf.: +45 4575 1111  
resound.com

**Kundeservice og reparation**

GN Hearing Danmark A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Tlf.: +45 4575 2222  
gnhearing.dk

CVR no. 55082715

400545006DK-18.06-Rev.B



Problemer i forbindelse med EU's direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF eller EU's direktiv om radioudstyr 2014/53/EU skal rettes til GN Hearing A/S.

